



National Instruments 수동 삭제 방법

1. NI 관련 모든 서비스를 종료합니다. (제어판 → 관리도구 → 서비스)

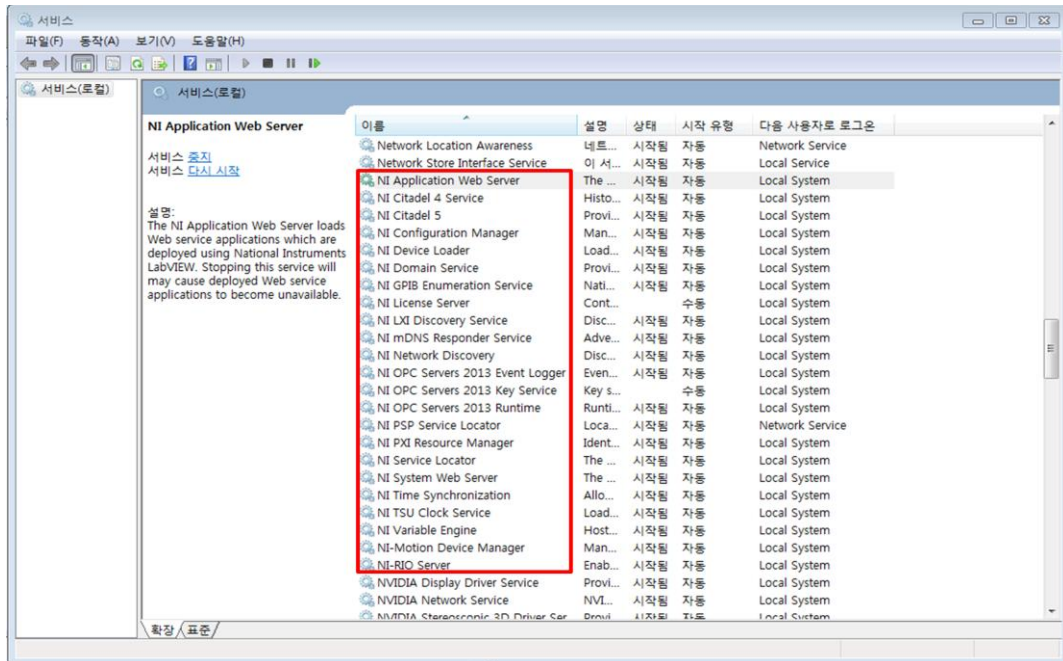

(항목을 선택하신 뒤 마우스 우 클릭하면 상태 창이 뜹니다. 정지를 선택해주시면 됩니다.)

2. 작업관리자에서 프로세스 중 아직 실행되고 있는 NI 관련 프로세스가 있다면 종료합니다.

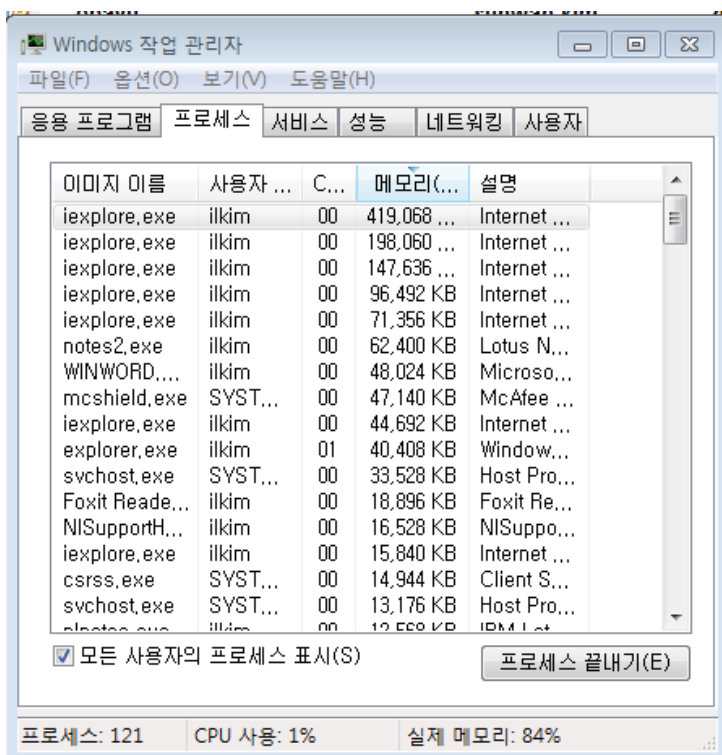


3. 일반적으로 설치 했다면 C:\Program Files\National Instruments 폴더 전체를 지웁니다.

(임의로 설치했을 땐 그 폴더 삭제)


4. 그리고 시작 → 실행에서 regedit 로 레지스트리 편집기로 들어갑니다.

5. 해당 레지스트리를 지웁니다.

– HKEY_CURRENT_USER\Software\National Instruments

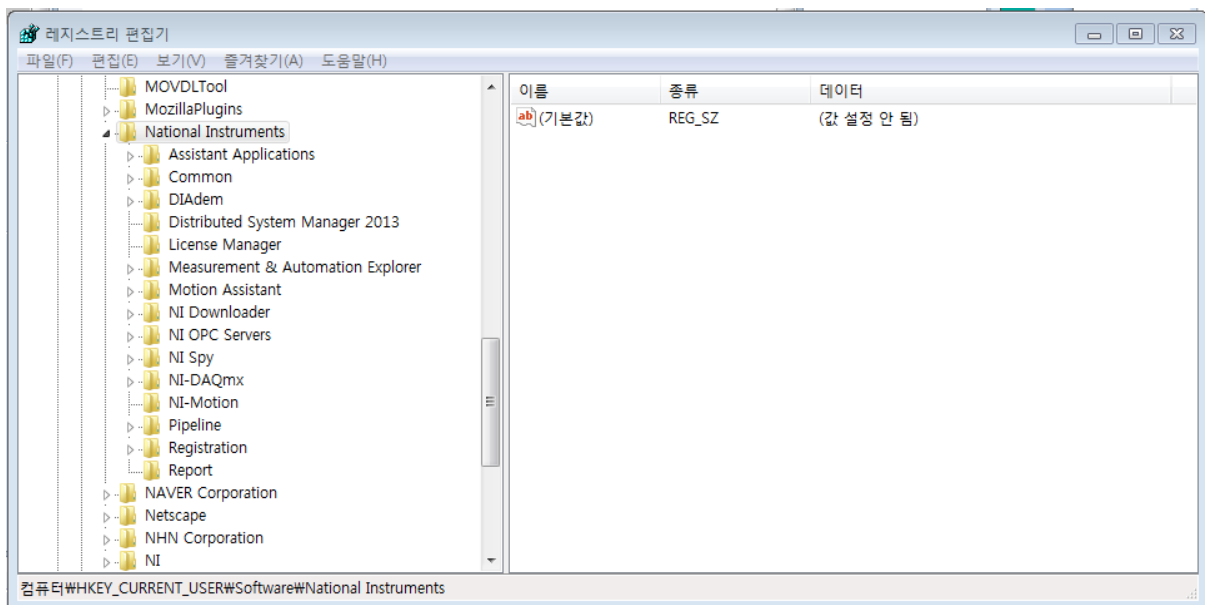


– HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\National Instruments

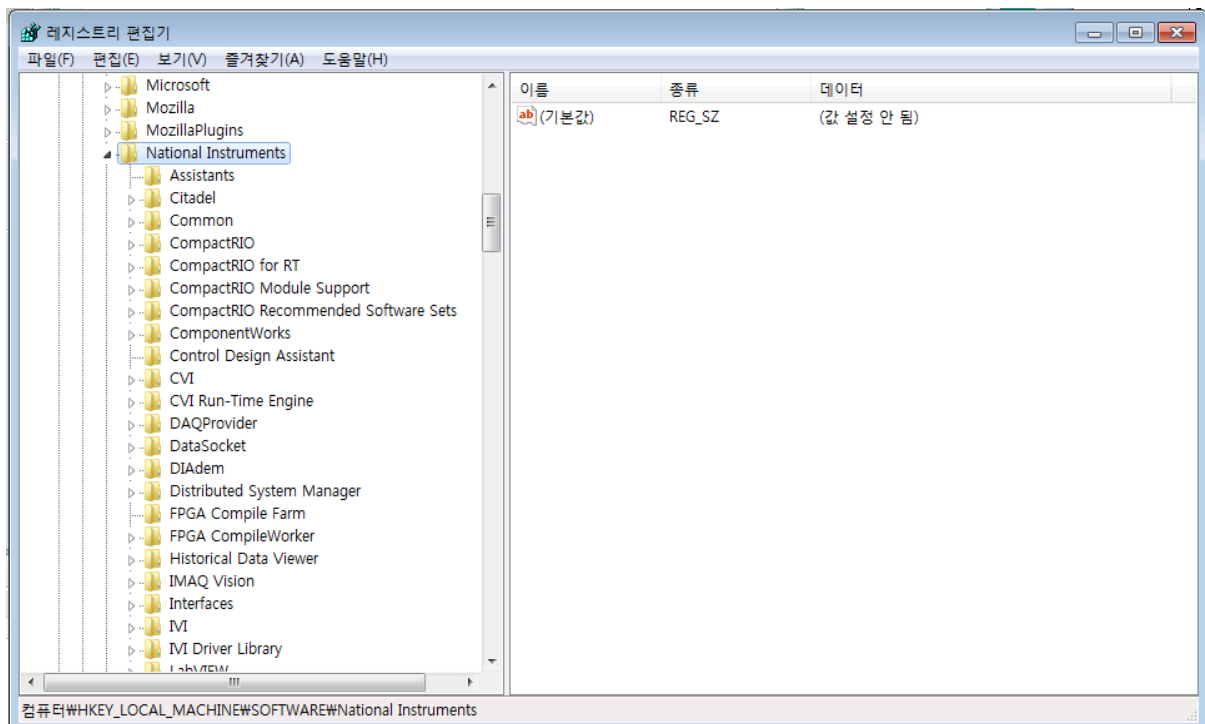

6. 다음 product install 관련 레지스트리를 삭제합니다.

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products

이쪽에 가면 굉장히 많은 registry들이 있는데 여기서 product name을 보고 NI 관련된 것들을 전부 지우도록 합니다.

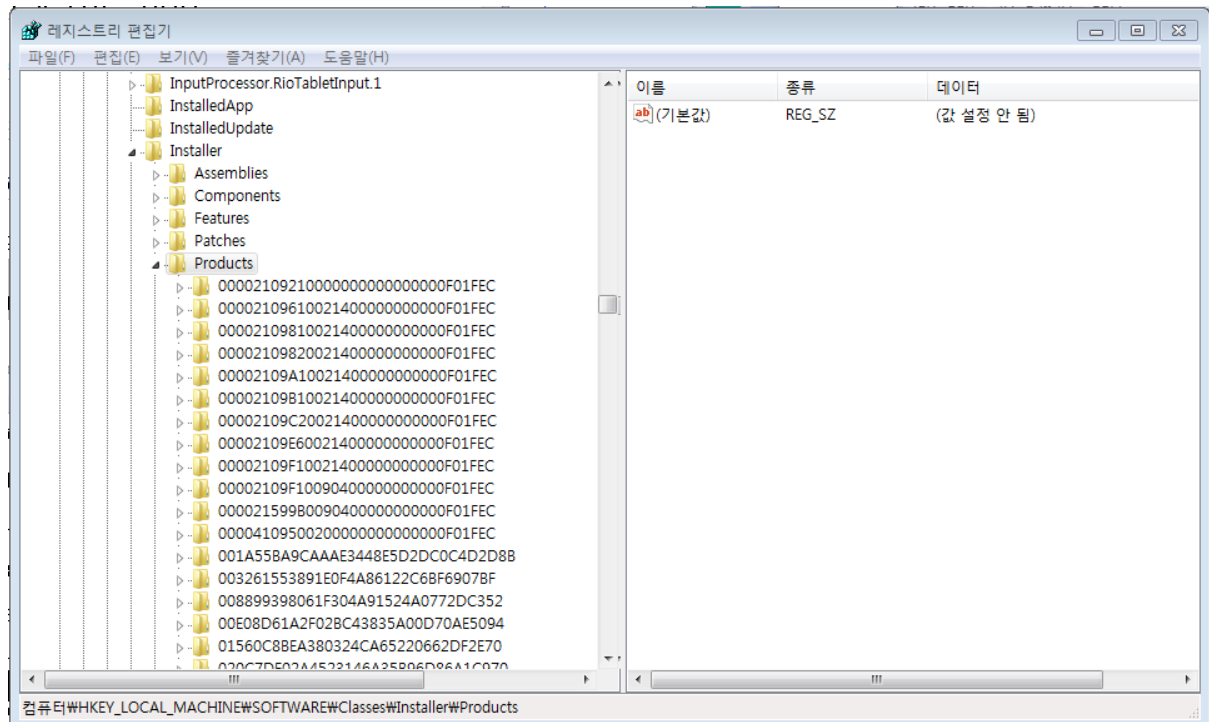

7. 재부팅을 하고 새로 설치를 하면 잘 동작합니다.

* LabVIEW 설치 시에는 먼저 플랫폼 1,2 CD를 넣으시고 설치하시면 되며 그 뒤에 NI Device Driver CD를 넣고 설치하시면 되겠습니다. 그리고 플랫폼 1 CD 설치 시에 설치 목록에서 원하시는 툴킷만 체크해서 다음을 진행하시면 됩니다.

* DAQ쪽만 사용하신다면 그냥 다음으로 진행하시고 LabVIEW 설치 후에 DAQmx 드라이버만 설치하시면 됩니다.